



Aspiratore portatile

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Per un'aspirazione sicura



306050

Aspiratore portatile

Per l'aspirazione di liquidi corporei come muco e catarro. Questa pompa dispone di un vaso autoclavabile da 1.000 ml in polycarbonato con valvola di troppo pieno. Il serbatoio e' fornito di indicatore (in bar e kPa) e regolatore di vuoto.

Dati tecnici

- ▶ Massima aspirazione: 40 l/min
- ▶ Massima pressione all'aspirazione: -0,8 bar
- ▶ Alimentazione: 230 V, 50 Hz
- ▶ Potenza assorbita: 107 W
- ▶ Lunghezza tubo 1,25 m
- ▶ Sicurezza: 1 fusibile da 1,6 A, 250 V
- ▶ Dimensioni (in cm): Lu. 35 x La. 21 x AL. 18
- ▶ Peso: 3,6 kg

306050

Accessori

Cannule aspirazione, curvo,
Lu. 17 cm, Ø 5 mm

199219

Punta aspiratore POOLE, curvo,
Lu. 22 cm, Ø 8 mm

199225

Cannule aspirazione modello
FERGUSSON, curvo, Lu. 19 cm,
Ø 3 mm

199230

Cannule aspirazione modello
FERGUSSON, curvo, Lu. 19 cm,
Ø 5 mm


199250

Catetere aspirazione YANKAUER,
curvo, Lu. 28,5 cm, Ø 2 mm

199220

Catetere aspirazione YANKAUER,
curvo, Lu. 28,5 cm, Ø 4,8 mm

199221

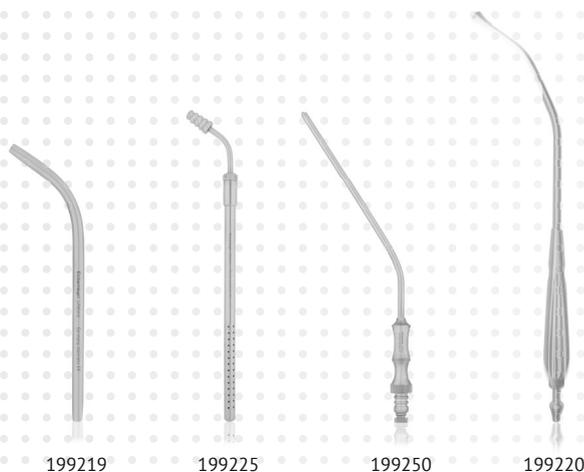

199219

199225

199250

199220

EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it